

MEDULLA





取扱説明書

MEDULLA EMS HEAD SPA LIFT +

(メデュラ EMS ヘッドスパリフト プラス)

スカルプマッサージ機

MESM-N257-1

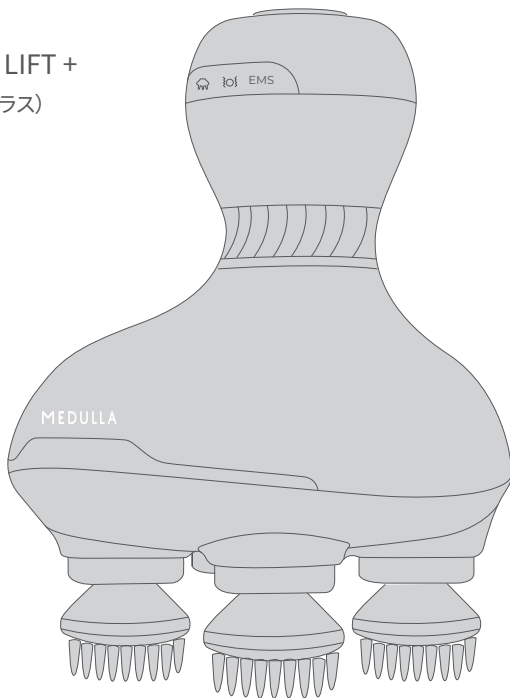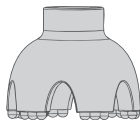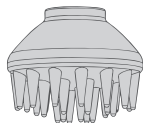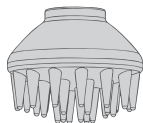

- 本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みください。
- 本書は必要ときにいつでも読めるよう、大切に保管してください。

ご使用前に必ずご確認ください

■ パッケージ内容

本 体	MEDULLA EMS HEAD SPA LIFT+ ×1
付 属 品	取扱説明書 ×1、USB充電ケーブル ×1、スタンド ×1、アタッチメント ×3種類


※万が一、パッケージ内容に不足などがあった場合は、MEDULLAお客様サポートにご連絡ください。




USB充電ケーブル




アタッチメント×3種類

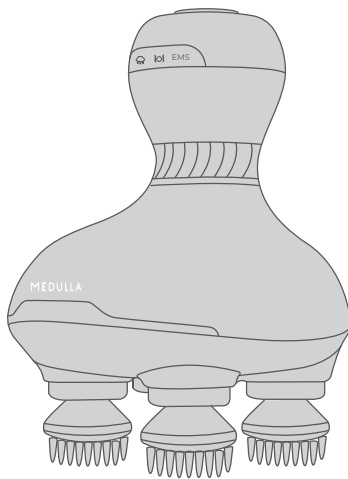

MEDULLA HEAD SPA LIFT+

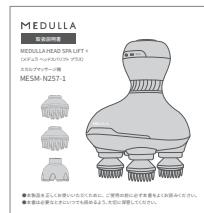

取扱説明書

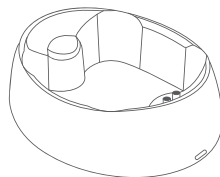

スタンド

安全上のご注意

人体への危害、財産への損害を防止するため、警告・注意事項をよく理解し記載事項を必ず守ってお使いください。



警告

取り扱いを誤ると、人身傷害を引き起こすおそれがあります。

- けがや身体の不調の原因になるため、使用中のアタッチメント部周囲の溝に指を入れないでください。
- 事故やけがの原因になるため、乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させないでください。
- 医師の治療を受けている時や下記の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。
アトピー性皮膚炎、乾癬（しろう）性皮膚炎、湿疹など頭皮や顔に皮膚炎。アレルギー体質の方・シリコン製品などで皮膚にトラブルをおこしたことがある方。急性疾患の方・慢性腫瘍のある方。感染症疾患の方。意思表示のできない方。麻痺および知覚障害の方。洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方。出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方。高血圧の方。目の病気・治療歴のある方。骨粗しょう症の方。頭や首に治療歴のある方。薬（特に抗凝固剤など、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬）を服用中の方。
- 発しん・発赤・かゆみなど何らかの異常があらわれたときは、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。
- 痛みや体調不良を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- 充電式電池内蔵のため発熱・発火・破裂の原因になるため火への投入、加熱、高温での充電・使用・放置しないでください。
- 火災・感電・けがの原因になるため改造・修理・分解は絶対にしないでください。

本製品は治療を目的とした医療機器に該当せず、筋肉の緊張をほぐすスカルプマッサー機です。

▶ 下記の場合は使用を避けてください。

- 心臓ペースメーカーを装着している方
- 心臓病の方
- 妊娠中または出産直後の方
- 骨折、骨粗しょう症、関節症のある方
- 悪性腫瘍のある方
- 皮膚に傷がある方、あざや湿疹のある方
- 飲酒後や疲労の激しい場合
- 頭皮に日焼け、傷、湿疹、皮膚炎、化膿性疾患などがある方



危険

取り扱いを誤ると、重症や死亡に結びつくもの。

- 人工心肺などの医療機器や装置型の電子医療機器を使用している方、整形手術を受けた方は使用しないでください。



注意

取り扱いを誤ると、人身事故や物的損害を引き起こすおそれがあるもの。


電源について【禁止事項】

- 感電やけがの原因になるため、ぬれた手でアダプター(別売)をコンセントから抜き差ししないでください。
- アダプター(別売)は、水につけたり、水洗いせず、風呂・シャワー室で絶対に使用しないでください。
- 感電やショートによる火災などの原因になるためアダプター(別売)が傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- やけど・感電・ショートによる火災などの原因になるため、コードや電源プラグを傷める、傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。
- たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になるため、コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。
- 必ず交流100～240Vで使用してください。

リチウムイオン電池について【注意事項】

- 本機専用につき、他の機器に使用したり、充電しないでください。
- 火への投入、加熱をしないでください。
- 衝撃を与えたり、分解・改造をしないでください。
- 火のそばや炎天下など高温の場所で使用、放置しないでください。

各部の名称

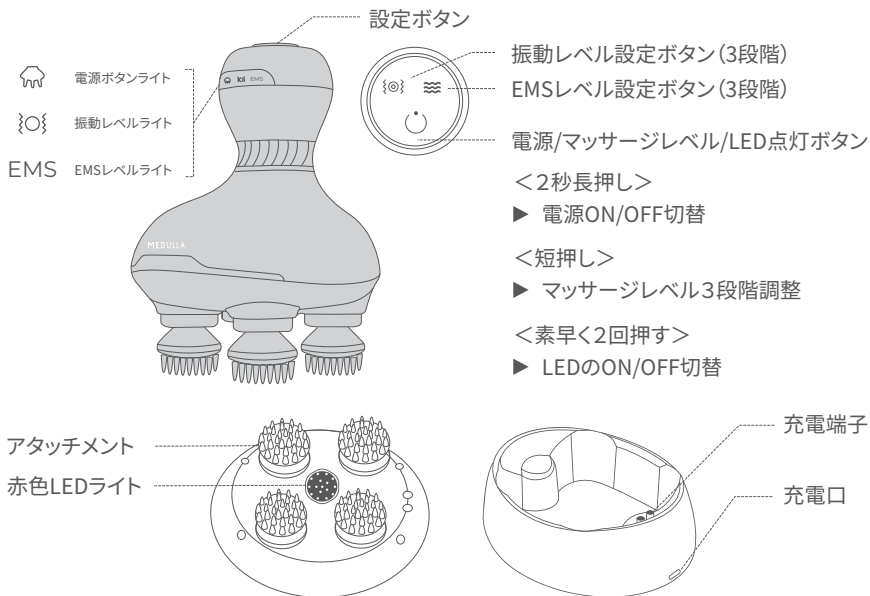

※充電端子保護フィルムについて

本体の充電端子(2箇所)には、青色の保護フィルムが貼付されています。開封後、初めてご使用になる前に、青色の保護フィルムを必ず剥がしてください。フィルムを貼付したままですと、正常に充電できない場合があります。


お使いになる前に

▶ 1日1回(約10分)の使用がおすすめです。

▶ 頭皮の状態は、体調によっても異なります。頭皮の様子を見ながら使用してください。

充電方法

本体・アタッチメントの水分をしっかりと拭き取り、完全に乾燥させてからスタンドに置いてください。

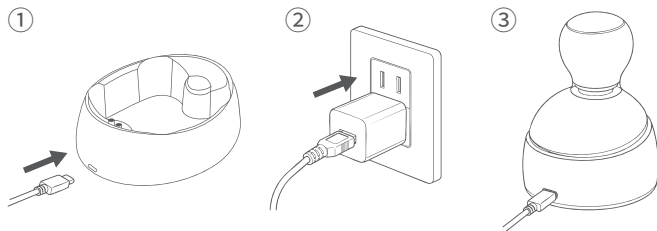

① スタンドにUSB充電ケーブル(付属)・アダプター(別売)を接続します。

② アダプター(別売)をコンセントに差し込みます。

③ 本体をスタンドに置いてください(充電端子が触れるように)。

充電時間の目安

約2.5時間

動作時間の目安

約2時間

※充電中は電源ボタンライト、振動レベルライト、EMSレベルライトが点滅する

※満充電は電源ボタンライト、振動レベルライト、EMSレベルライトが全灯する

< 注意点 >

- ・急速充電器は故障の原因になるため必ず付属のUSB充電ケーブルを使用してください。
- ・長期保管時は1カ月ごとに充電してください。

使用方法

1. 電源を入れる

電源ボタンを2秒間長押しして電源をONにします。

※本製品は赤色LEDを搭載しており、使用感を高める補助機能としてご活用いただけます。


※モードの切り替えは下記の設定ボタンで行えます。

マッサージの強さを選ぶ

電源ボタンを押すたびに、強さが切り替わります。

電源をONにすると、マッサージの強さは自動的に「弱」からスタートします。


操作	電源オン時	1回押す	2回押す
モード	弱	中	強

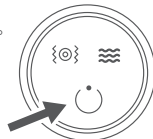

振動レベルを選ぶ

振動レベル設定ボタンを押すたびに、振動レベルが切り替わります。

操作	1回押す	2回押す	3回押す
モード	弱	中	強

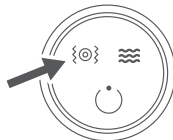

EMSレベルを選ぶ

EMSレベル設定ボタンを押すたびに、EMSレベルが切り替わります。

操作	1回押す	2回押す	3回押す
モード	弱	中	強




※上記3モードすべて、弱→中→強→弱→中→強の順に繰り返し切り替わります。

赤色LEDライトを使う

マッサージの強さ・振動・EMSのレベルを設定した後、電源ボタンを素早く2回連続で押すことで、赤色LEDが点灯します。同じ操作でLEDライトのON／OFFを切り替えられます。

2. 電源を切る

電源ボタンを2秒間長押しすると、電源がオフになります。

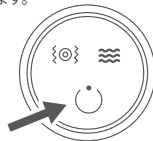

インバスでご使用の場合

- ① 髪の毛を軽くすすぎ洗いしシャンプーをつけて髪全体を泡立てます。
- ② 本体を片手に持ちます。
 - ・シャンプー液や泡などですべる場合は、手を洗ってからご使用ください。
- ③ アタッチメント部を頭皮にあてたまま、スライドさせるように動かします。
 - ・アタッチメントが頭皮にあたるように軽く押し当てます。
 - ・髪の毛が長い方は、髪を分けたりして、先端が頭皮にあたるようにしてください。
 - ・連続で10分間使用すると、自動的に停止します。
- ④ 使用後、電源ボタンを約2秒間押し、電源を切ります。
- ⑤ シャンプーを洗い流します。
 - ・シャンプーを洗い流した後は、通常のお手入れをしてください。
- ⑥ 本体を水洗いします。



アウトバスでご使用の場合

- ① 髪の毛を軽くとかし、絡まりをほぐしておきます。
- ② 本体を持ち、頭皮に当てます。
- ③ アタッチメント部を頭皮にあてて、スライドさせるように本体を動かします。




アタッチメント着脱方法

<取り外し方>

接続部の根元からアタッチメントを回転させます。

<取り付け方>


アタッチメントを本体の接続部に合わせます。
カチッと音がするまで押し込みます。

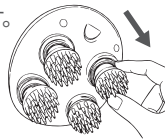

お手入れ方法


ご使用後は必ず水で本体を洗ってください。

- ① 本体からアタッチメントを取り外す。
- ② 本体とアタッチメントについている髪の毛や汚れを洗い流す。
 - ▶ 80℃以上のお湯は使用しないでください。
 - ▶ 取りにくい汚れは綿棒をお使いください。
 - ▶ アタッチメントは歯ブラシなどでこすらないでください。
 - ▶ アタッチメントは強く押ししたり、引っ張ったりしないでください。

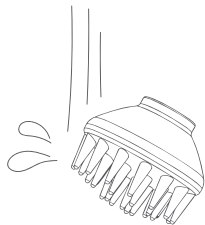

- ③ 水分を乾いた布で拭き取る。
- ④ 風通しの良い場所で乾かす。

- ▶ 本体とアタッチメントははずした状態で乾燥させてください。



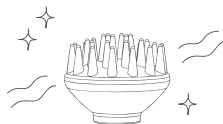


<ご注意>

- ▶ 浴室用洗剤やヘアカラー剤などが付着した場合、直ちに水洗いし、きれいに洗い流してください。
- ▶ 故障、部品の割れ、変色、塗装はがれなどの原因になるため、アルコール・除光液などではふかないでください。
- ▶ 部品の変形や故障の原因になるためドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥させないでください。
- ▶ においの原因になるため濡れたままの状態でも長時間放置しないでください。
- ▶ においがする場合、再度水洗いをしてください。

製品特徴

本製品には、頭皮と髪の健康のトータルケアをサポートするため、以下の技術が組み込まれています。

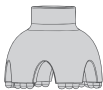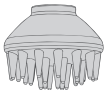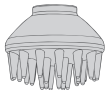機能	特徴
赤色LED	頭皮への光照射により、健やかな頭皮環境をサポートします。
EMS3段階	微弱電流で頭皮の筋肉にはたらきかけます。3段階の強度調整で、自分に合ったケアが可能です。頭皮や肌が完全に乾いた状態でご使用の場合、電流の通りが弱くなる場合があります。
3種のアタッチメント	頭皮の状態や用途に合わせてアタッチメントを交換でき、ボディ（二の腕など）やフェイスまで幅広く対応します。  頭皮用(柔らかめ) 頭皮用(硬め) ボディ・フェイス用 ※本体に最初に装着されているアタッチメントは(柔らかめ)です
防水機能	IPX7相当の防水性能を備えています。一時的な水没（最大1mの深さで30分間）に対応していますが、長時間の浸水や入浴時の使用は避けてください。充電用USBケーブルに防水性能はありません。

保管方法

- ▶ 湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になるため、湿気の少ないところで保管してください。
- ▶ 本体やアタッチメントにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。
- ▶ アダプター(別売)を抜き、乾いた布でふくことを推奨します。

トラブルシューティング

本製品はご家庭でのパーソナルケア用であり、業務用には適しません。使用中に不具合が発生した場合は、以下の点をご確認ください。

現象	考えられる原因	対応
使用中に突然電源が切れる、電源が入らない	満充電になっていない	本体を満充電にしてからお使いください。
充電時にLEDパネルが点灯しない	本体が正しくセットされていないか、正しく接続されていない	本体、USB充電ケーブル、充電器を接続し直すか、別のアダプター(別売)を使用してください。
EMSが弱い、感じない	アタッチメントがお肌に上手く当たっていない、お肌が乾燥している	EMSレベル設定ボタンで強さを上げてください。水や化粧水などでお肌を十分に保湿してください。

その他本体、アダプター(別売)、コードが変形したり異常に熱かったり、こげ臭いにおいがしたり、使用中に異常な音がする場合は、すぐに使用を中止してください。

処分方法

製品廃棄の際はバッテリーのリサイクルにご協力ください。



本製品にはリチウムイオンバッテリーが使用されています。
資源の有効活用のため、廃棄の際にはお住いの自治体にお問い合わせください。

仕様パラメーター

種 別	スカルプマッサージ機	製品番号	MESM-N257-1
定格電圧	3.7V	消費電力	約5W
充電電圧	5V	充電電流	1A
重 量	約440g	生 産 地	中国
本体寸法	約115mm×138mm×93mm	使用電池	1200mAh
充電時間	約2.5時間	使用時間	約2時間
材 質	ABS樹脂、シリコーン		

※ 製品改良のため、一部の仕様は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

※ 本製品はリチウムイオン電池を搭載しております。

製品についてのお問い合わせ

輸入販売元：株式会社Sparty

住所：東京都渋谷区道玄坂1-22-10 見真ビル3F

MEDULLAのメーカー保証

購入日から1年間の初期不良に対する保証を提供します。

保証期間中は素材・製造工程の欠陥によるパーツまたは製品全体の交換を承ります。

以下の場合には保証対象外となります

- ▶ 誤った使用方法によって生じた製品不良
- ▶ 誤った電源使用・不適切なソケットへの差し込み・人為的な損傷
- ▶ 通常使用による経年劣化
(パーツ割れや塗装剥がれなど製品機能への影響は無いもの)
- ▶ 他の用途への転用・不適切な取り扱い・弊社以外によるアクセサリーの使用
- ▶ 付属品・消耗品の紛失、破損
- ▶ 不可抗力(落雷・地震・洪水等)による損傷

その他、保証規定・修理交換対応について

詳しくは下記のQRコードより規定ページをご確認の上、対象の場合お手続きをお願い申し上げます。



<http://club.ec.medulla.jp/qr/warranty>