

ALLUEM


取扱説明書

ALLUEM SLIM NOSE

(アリュデム スリムノーズ)

鼻専用美顔器

ALSM-N023-1

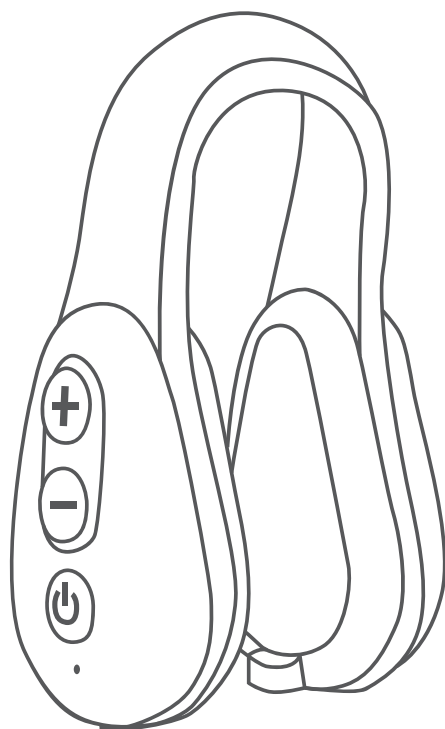

- お買い上げいただきありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みください。
- 必要なときにいつでも読めるよう、大切に保管してください。

安全上のご注意

本書に記載されている製品のイラストや機能の紹介、一部 用語の解説は、参考情報としてのみ提供するものです。ご使用時は実物に準ずるものとします。引用されているデータは製造元が提供したものです。

本書の記載内容および注意事項に従って正しくお使いください。

- 以下に示した注意事項は安全を確保する上で極めて重要なものです。
ここに示す注意事項は必ずお守りください。



危険

取り扱いを誤ると、死亡または重傷をともなう
人身傷害を引き起こすおそれがあります。



注意

取り扱いを誤ると、人身事故や物的障害を
引き起こすおそれがあります。



危険

取り扱いを誤ると、死亡または重傷をともなう
人身傷害を引き起こすおそれがあります。

- 故障していると思われる場合は本製品を使用しないでください。故障状態のままで使用すると、身体に悪影響を及ぼしたり、その他の危険を引き起こしたりする可能性があります。
- 可燃性または爆発性の物質（アルコール、ガソリン、エアゾールなど）の近くで本製品を使用しないでください。火災や爆発を引き起こすおそれがあります。
- 本製品は、身体的、感覚的、精神的な能力に制限がある方、経験や一般的な知識に乏しい方（子どもを含む）による使用を意図したものではありません。
- 本製品に変形や破損が見られる場合、または異臭がする場合は、感電や火災の危険を避けるため、使用を中止してください。
本製品をペットに使用しないでください。ペットにけがをさせるおそれがあります。
- 以下のような医療機器をお使いの方は、本製品のご使用をお控えください。体内に医用電気機器（心臓ペースメーカー、植込み型除細動器など）を装着している方を使用している方、あるいは携帯型心電計などの医療機器を装着している方。

【ご注意】

上記の安全に関する注意事項はすべて網羅しているわけではありません。ご使用に不安がある場合は、事前に医師にご相談いただくか、弊社までお問い合わせの上、ご判断ください。

- 本取扱説明書に記載されている目的以外で使用しないでください。人身事故や機器の故障の原因となります。
- 身体的または精神的に障がいのある方だけの使用はおやめください。事故やけがのおそれがあります。
- アルコール、シンナー、ガソリン、除光液、ヘアスプレーなどの可燃性物質の近くで使用しないでください。火災・感電・けがの原因になります。
- 火の中や、加熱器具、高温になる場所での充電、使用、放置はしないでください。過熱・発火・破裂のおそれがあります。
- 水の近く、浴室内、入浴中の使用は避けてください。感電、ショート、火災の原因になります。
- 電極パッドを金属と接触させないでください。故障やけがの原因になります。
- 使用していないときや清掃時は、必ず電源を切ってください。感電、ショート、火災の原因になります。
- 本製品を分解、修理、改造しないでください。火災、感電、けがの原因になります。
- 充電中に異常を感じた場合は、すぐに充電USBケーブルを抜いてください。使用中に煙、異音、異臭などが発生した場合は、すぐに使用を中止してください。



注意

取り扱いを誤ると、人身事故や物的障害を引き起こすおそれがあります。

- 故障や発火、熱による火災を避けるため、本製品付属の充電USBケーブルをご使用の上、充電に必要な電力を供給できる充電器は家庭用コンセントに正しく接続してください。
- 本書の記載内容および推奨事項に従って正しくお使いください。鋭利な道具や腐食性、揮発性の希釈剤が入った洗剤は使用しないでください。変色や損傷を引き起こすおそれがあります。
- 湿気が多い場所や高温(50℃以上)・低温(-10℃以下)になる場所に放置、保管しないでください。
- ご使用の後は、すみやかに本製品を清掃してください。
- 本製品で遊ばないよう、お子様から目を離さないでください。

- ビニール袋などの梱包材は、お子様の手の届かない場所に保管してください。
 - コンロや裸火など、高温になる場所に本製品を置かないでください。
 - 半年以上使用していない場合は、まずは充電をしていただき、ご使用前にLEDライトが正常に点灯・消灯するか、ひび割れや損傷がないかなど、異常がないことを確認してください。
 - 本製品はリチウムイオン電池を使用していますので、未使用の場合でも半年に1回は充電をしてください。
 - アルコール、シンナー、ガソリン、除光液などの腐食性のある溶剤で本体を拭かないでください。本体の表面が傷むおそれがあります。
 - 本体を落としたり衝撃を与えないでください。故障や、落下によるけがの原因となります。落下や衝撃で本体に破損が見られる場合は使用を中止してください。
-

■ 使用を避けるべき方

- 生理中、妊娠中、授乳中の方。
- 成長期または思春期の方。
- 使用部位に金属インプラントがある方。
- 現在または過去に以下の疾患をお持ちの方：がん（特に皮膚がん、前がん性のほくろ）、急性疾患、結核性疾患、発熱性疾患、感染症、血液疾患、内臓疾患、皮膚疾患、アレルギー性皮膚炎など。
- アレルギー体質の方、皮膚疾患・アレルギー性皮膚炎のある方、敏感肌の方、または皮膚が弱い方は、本製品の使用により不快感や副作用が出る可能性があります。使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
- エイズなど免疫抑制性疾患、または免疫抑制剤を服用して免疫機能が低下している方。
- 物理的刺激によってシミや色素沈着を起こしやすい方。
- 過度の疲労、体調不良、飲酒後、または睡眠薬を服用中の方。
- ステロイド剤やホルモン剤を長期服用している方、または肝機能障害により毛細血管拡張が見られる方。
- 以下のような医療機器をご使用の方：体内に埋め込み型の医療機器（人工肺、ペースメーカー、植込み型除細動器など）を使用している方、あるいは携帯型心電計などの医療機器を装着している方。

【ご注意】

上記の安全に関する注意事項はすべてを網羅しているわけではありません。ご使用に不安がある場合は、事前に医師にご相談ください。

各部の名称

■ 本体


レベルアップ

レベルダウン

電源ボタン/モード切替

インジケータランプ

充電ポート

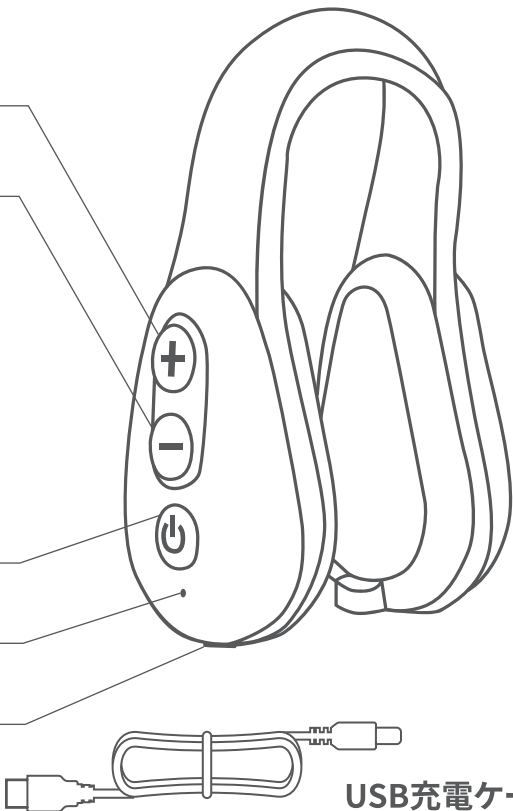

USB充電ケーブル

仕様パラメータ

種 別	鼻専用美顔器	製品番号	ALSM-N023-1
定格電圧	3.7V	消費電力	約0.75W(充電時)
充電電圧	5V	電流(使用時)	0.15A
重 量	約20g	生 産 地	中国
製品寸法	約68mm×35mm×30mm		
梱包リスト	本体×1、USB充電ケーブル×1、説明書カード×1		

※製品改良のため、一部の仕様は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください
※本製品はリチウムイオンバッテリーを搭載しております。バッテリーは製品に内蔵されており、お客様ご自身での取り外しや交換等はできません。

製品の特徴

本製品には、以下の技術が組み込まれています。

機能	特徴
6種類のモード	6モードあることで、その時々気になる部分に合わせた使い方ができます。
10段階の強度調整	EMSの刺激に慣れていない方でも、最も優しい1段階から安心してお使いいただけます。
シリコン素材	柔軟なシリコン素材のため、どんな鼻の形にもぴったりと吸い付くようにフィットします。これにより、EMSの電気刺激を満遍なく均一に届けることができます。
TypeC充電	充電の際は付属のUSB充電ケーブルをご使用いただくことで安全に長くご愛用いただけます。

充電方法

初めて本製品をご使用になる場合や、長期間使用されなかった場合は、必ずご使用の前に充電を行ってください。

充電時間	動作時間
約1.5時間	約120分

※ 自動電源オフ機能により待機状態(操作しない状態)で1分経過すると自動で電源がオフになります。

1. 付属のUSB充電ケーブルのUSB-Aタイプを、ACアダプタ(別売)に接続してください。

※ 本製品にACアダプタ(別売)は付属しておりません。USB-Aタイプのポートを備えたACアダプタ(別売)をご用意ください。

※ USB充電ケーブルは必ず本製品付属のものをご使用ください。USBケーブルのUSB-Cタイプを本体の充電差込口に接続してください。

2. 赤色インジケータランプが点灯すると充電が開始されます。 充電が完了すると緑色に点灯します

3. 充電が完了しましたら、ACアダプタ(別売)をコンセントから抜いてください。




必ず安全規格に適合する充電器を使用してください(アダプターの定格入力電圧100V50/60Hz、定格出力電圧5V、定格出力電流2A以上)。

使用方法

1日に1～2回 1回約15分を目安にご使用ください。毎日使用する事も可能です。

1. 電源ボタン「」を長押しすると電源が入り、青色ライトがデフォルトで点灯します。電源を入れた後、1分間操作がない場合は自動的に電源が切れます。
2. 電源ボタンを短く押すとモードが切り替わります。全6種類のモードがあり、モードを変更するとインジケータランプの色も変わります。
3. 「+」ボタンを短く押すと、EMSマッサージの強度が上がります(全10段階)。低い強度からのご使用をおすすめします。
4. 「-」ボタンを短く押すと、EMSマッサージの強度下がります。

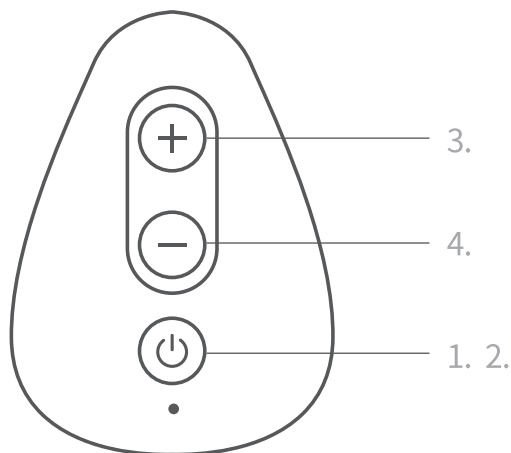

モード	点灯色	おすすめ	リズム
1	青	はじめて お使いになる方	少しずつテンポが 速くなります
2	緑	短い時間で お使いになりたい方	細かく小刻みな リズムがつづきます
3	水色	毎日つづけて お使いになりたい方	一定のテンポで リズムを刻みます
4	黄色	お使いに慣れた方	ゆっくりとした長めの リズムです
5	ピンク	リズムの変化を お好みの方	中テンポから小刻みへ 切り替わります
6	赤	すべてのリズムを お試しになりたい方	長め・中程度・小刻みの 3種類を組み合わせ た約20秒のプログラム

使用シーン

1. 洗顔後、スキンケアなどで肌を整えてください。

ご使用前に必ず鼻まわりの汚れや皮脂、スキンケアで残った油分などを軽くティッシュで押さえてからご使用ください。

油分が残っていると、刺激を感じにくかったり、装着時にずれてしまうおそれがあります。




2. 本体を広げて鼻に装着します。

電源ボタンが顔の右側にくるように、本体の両端を持ち、少し開いて滑らせながら鼻に装着してください。

※電極部を肌にしっかりと密着させてください。

※無理に本体を広げないでください。破損の原因になります。

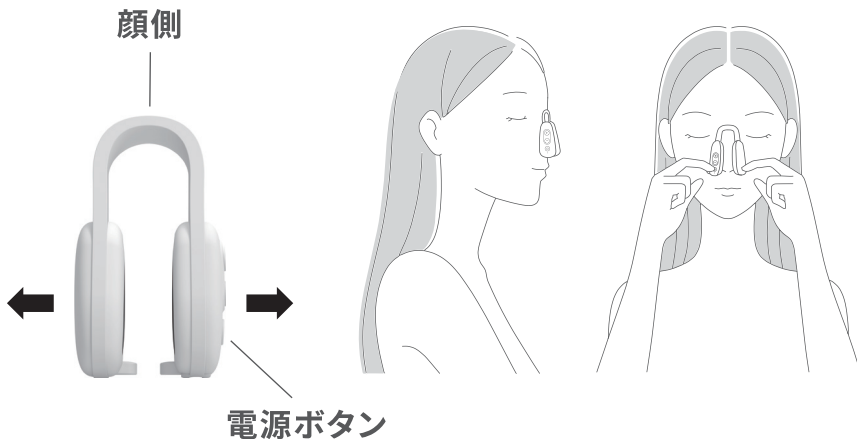

お手入れ方法

- 本体・USB充電ケーブルは水洗いしないでください。故障の原因となります。
- 本体に汚れが付着した場合は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。パッドに化粧水などが付着し汚れが落ちにくい場合は、ぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞ってから拭き取り、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。
- 変色を防ぐため、シンナー・ベンジン・除光液などの使用は避けてください。

保管方法

- 高温多湿の環境(浴室、車内など)を避け、直射日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。
- 使用しない時は、お手入れをしてから、適切に保管してください。
- 乳幼児の手の届く場所やペットの近くに置かないでください。
- 長期保管後、再び使用する場合は、製品に異常がないことを確認してから使用してください。
- 電源がオフになっていることを確認してから保管してください。長期間使用しない場合は、半年おきに充電をしてください。

※ 本製品は充電式のため、使用していない状態でもバッテリーを消費します。

トラブルシューティング

本製品はご家庭でのパーソナルケア用であり、業務用には適しません。使用中に不具合が発生した場合は、以下の点をご確認ください。

現象	考えられる原因	対応
充電ができない	USB充電ケーブルまたはACアダプタ(別売)故障の可能性があります。	他のUSB充電ケーブルやAC アダプタ(別売)で充電をお試しください。
電源が入らない	充電中(充電ケーブルが接続された状態)の場合は使用できません。	USB充電ケーブルを外して再度電源を入れてください。
EMSを感じない	お肌が乾燥しているとEMSを感じにくくなります。	お肌を保湿された状態で再度お試しください。

処分方法

処分方法はお住まいの自治体にお問い合わせの上、環境保護のために分別回収にご協力ください。

製品廃棄の際はバッテリーのリサイクルにご協力ください。



本製品にはリチウムイオンバッテリーが使用されています。資源の有効活用のため、廃棄の際は
お住まいの自治体にお問い合わせください。

製品についてのお問合せ

輸入販売元：株式会社 Sparty

住所：東京都渋谷区道玄坂1-22-10 見真ビル3F

製品をご購入されたサイトのお問い合わせ窓口まで購入者情報・注文番号を記載のうえお問い合わせください。

ALLUDEMのメーカー保証

購入日から60日間の初期不良に対する保証を提供します。

保証期間中は素材・製造工程の欠陥によるパーツまたは製品全体の交換を承ります。

以下の場合は保証対象外となります

- ▶ 誤った使用方法によって生じた製品不良
- ▶ 誤った電源使用・不適切なソケットへの差し込み・人為的な損傷
- ▶ 通常使用による経年劣化
(パーツ割れや塗装剥がれなど製品機能への影響は無いもの)
- ▶ 他の用途への転用・不適切な取り扱い・弊社以外によるアクセサリーの使用
- ▶ 付属品・消耗品の紛失、破損
- ▶ 不可抗力(落雷・地震・洪水等)による損傷