

✦Magic✦Whitening

取扱説明書




同梱 内容

- | | | | | | |
|---------------|----------|--------------|----------|------------------|----|
| ・LEDライト | 1個 | ・薬剤ジェル | 2本 or 5本 | ・特製シェードガイド | 1枚 |
| ・ブラシ | 2本 or 5本 | ・トレイ | 1枚 | ・マウスオープナー | 1個 |

※出荷タイミングに依り、黒色版 LED ライトが同梱される場合がございます

動画でも説明中

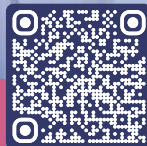

STEP 01

ホワイトニングの前準備



しっかり汚れ除去♪

ホワイトニング前に歯磨きをして、歯の表面の汚れを落とします。
汚れを取ることで、薬剤ジェルが浸透しやすくなり、ホワイトニングの効果を高めることができます。

期待できるホワイトニング効果

本製品は、5回ほど活用することで、白さを実感できる方が多いです。
まずは5回続けて行うことを目指しましょう。



綿棒などで念入りに

唇が乾燥しがちな方は、事前にワセリンやリップクリームなどで保湿をしましょう。
ホワイトニングの際は口を大きく開く必要があるので、唇が切れないように注意してください。

STEP 02

薬剤ジェルを歯に塗る



左右合わせて1メモリ分

薬剤ジェルとトレイを取り出します。

薬剤ジェルは、先端のキャップを外し、シリンジ部分を押すことで中身が出てきます。

1回のホワイトニングでジェル1メモリ分を使いきるように、トレイの左右の穴に押し出してください。



注意

一度容器から出たジェルは元に戻さないでください。

ホワイトニング後に避けるべきこと

ホワイトニング後 24 時間ほどは着色の原因となる色の濃い飲食物は避けましょう。カレー / 紅茶 / コーヒー / ワインなどは NG です。



次にマウスオープナーを取り出して、U 字部分を手に持ちます。
大きい半円の方を片方ずつ口の中に入れ、力を入れず頬を外に引っ張るようにして装着します。
小さい半円は唇に合わせて口から出す形で大丈夫です。



注意

よだれが垂れてくるので、衣服などを汚さないように気をつけてください。



ホワイトニングする歯だけで OK

コットン類やティッシュなどで、歯の表面の水分を拭き取って乾燥させます。
乾燥が不十分だとホワイトニングの効果が落ちるので、しっかり水気を拭き取りましょう。

美しい白い歯を手に入れるコツ

白くしたい歯にはジェルをしっかり塗ってください。
犬歯など奥の方の歯は白くなりにくいので、厚めに塗りましょう。



笑った時に見える歯の数は
上下 8~10 本ずつです

いよいよ、薬剤ジェルを歯に塗っていきます。
トレイ左右の穴に出したジェルは、それぞれ上の歯と下の歯用のものです。
ブラシで取り、上下の歯それぞれ8~10本ずつ塗っていきます。



注意

歯ぐきや唇など歯面以外に付着した場合は、速やかに綿棒やコットンで拭き取ってください。

STEP 03

LED ライトを照射する



青色ライト

ホワイティングに特化
15分×2回実施がおすすめ



赤・青色ライト

コラーゲンの産出を促進
歯周病予防にも効果的

薬剤ジェルを上下の歯に塗り終わったら、LEDライトを取り出します。
表面にある電源ボタン（ロゴ上のマーク）を長押しすると、青色ライトが15分間点灯します。
もう1回長押しすると、赤・青色ライトが10分間点灯します。さらに長押しすると電源OFFになります。

楽にホワイトニングを続けるコツ

照射中は、ソファやベッドの上でお過ごしいただくのが快適です。
慣れてきたら、入浴中などに行っても問題ありません。



ながらホワイトニングだからお手軽♪

お好みの色に設定してから
LEDライトを口に入れ、照射を開始してください。

1回につき30分間行うのが推奨ですが、
お時間が取れない時でも最低15分間は
行っていただくようお願いします。

バッテリー残量と表示について

バッテリー残量	青色ライト表示内容
 残量が少ないとき	 5回点滅
 充電中	 連続点滅
 充電完了時	 常時点灯



歯の色をチェック

照射を終えたら、歯に付いているジェルを落とすため、うがいでしっかり口をゆすぎます。
ゆすぎ終わったら、シェードガイドを出して、ホワイトニング後の歯の色の变化を見てみてください。
5回ほど行くと、白さを実感できるようになります。

使用したLEDライト・ブラシ・トレーを水で洗い、水気を切って再度製品箱の中に保管してください。
(ラバー部分は取り外して丸洗い可能)

使用上の注意

●使用時の注意事項

1. 薬剤ジェルは、歯肉や舌などに触れないように塗布してください。
2. 薬剤ジェルが目や肌に付着した場合、速やかに水で洗った後、専門医に相談してください。
3. 睡眠中に本製品を使用しないでください。
4. 使用中や使用後に薬剤ジェルを飲み込まないように注意してください。
5. 医師から処方を出されていない方は使用しないでください。
6. 製品使用中、口腔内に不快感や異常が生じた際は、使用を中止し医師に連絡してください。

●保管時の注意事項

直射日光の当たらない場所で、かつ温度変化の少ない常温環境での保管を推奨いたします。

保管の際は、縦置きでノズルが上向きになるようにしてください。

開封から1年間以上経過したジェルは使用しないでください。

●液化化した際の対処

直射日光/寒冷環境などによりジェルが液化化する場合がございますが、
常温に戻すことで通常の状態に戻ります。

以下の方法をお試しください。

- ・ ボトル下部を手でやさしく温める
- ・ ボトルをビニール袋に入れ、80℃前後のお湯で10秒ほど湯煎する

※液状のままご使用いただいても効果に問題はございませんが、液だれには十分ご注意ください。

※いずれの方法でも製品の効果に支障はございませんので、ご安心ください。

常温環境で保管



直射日光を避ける



子供に触らせない



取扱説明書に従う



再利用禁止



使用頻度

ご自身のペースに合わせて、ご活用ください。

短期間で集中的に行うことで効果が高まり、目標の白さに早く到達します。

結婚式などイベント前の方におすすめ

頻度	人から褒められるレベル (S16)	有名芸能人レベル (S6)
週 5 回	約 1 ヶ月	約 2 ヶ月半
週 2 回	約 2 ヶ月半	約 6 ヶ月

目標の白さに到達しても、放置すると歯は1ヶ月ほどで黄ばんでいきます。

白い歯をキープするために、メンテナンスとして定期的にご活用ください。

ピカピカの白さをキープしたい方はこちら

頻度	白さの目標
週 2 回	芸能人レベル (S6) の 白さをキープ
週 1 回	人から褒められるレベル (S16) の 白さをキープ

※S から始まる番号は、同封の「シェードガイド」上の白さを表しています。上記の効果は各回 30 分間行った場合の目安であり、個人差があります。



LINE 公式アカウント

製品に関する
お問い合わせはこちら



公式 Instagram

最新の情報や利用者の
口コミをチェック



サービス提供者

株式会社スマイルアンドトゥース

〒102-0083 東京都千代田区麹町 4 丁目 4-4 ACN 麹町ビル 11F

販売元事業者

市川歯科医院

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-1-11 マスダビル 2F