


Enjoy Good Foot

# Jog foot

エアフット

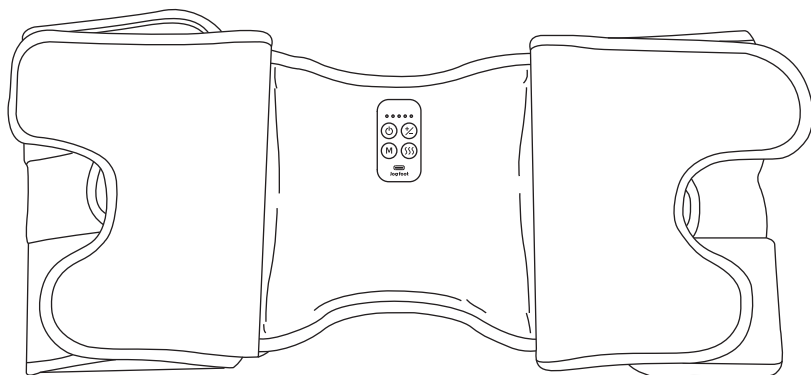

取扱説明書

保管用

保証書付

Zyva studio



HOME PAGE



Instagram



X



Line

# お買い上げいただき 誠にありがとうございます

---

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、  
正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、  
ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。  
この取扱説明書は大切に保管してください。

## 目次

---

製品仕様と定格	2
安全上のご注意	3
セット内容と各部の名称	7
お使いになる前に	8
ご着用方法	9
ご使用方法	12
お手入れ方法と注意事項	14
保管について	15
お問い合わせする前に	16
Q&A	17
保証とアフターサービスについて	18
MEMO	19
保証規約	22
保証書	23

# 製品仕様と定格

商品名	ジョグフット エアフット
型番	EGF-30
電源	充電式(リチウムイオン電池内蔵 2,400mAh/3.7V)
定格消費電力	約8W(最大10W)
充電時間(※1)	約120分
電池持続時間(※2)	約80分
材質	コントローラー: ABS、PP ベルト: ポリエステル、ナイロン、PVC (ポリ塩化ビニル)
寸法	約W930mm × D50mm × H260mm
重量	約630g
エア圧力	最大60.0 KPa(±10%)
使用可能サイズ	巻き付け周囲: 約20~52cm
タイマー	モード10分 / 自動電源OFF機能
セット内容	本体、ツボ押しアタッチメント大2個・小2個、 充電用ケーブル、取扱説明書(保証書付)
生産国	中国

製品の仕様、外観などは改良のため予告なしに変更することがあります。

※1 充電時間は付属の充電用ケーブルで充電した際の目安です。

※2 弊社推奨の使用 방법에準じます。

実際の時間は、使用環境や使用状況により異なります。

# 安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
また、お読みになったあとは必要な時にご覧になれるよう、大切に保管してください。  
ここに示した説明事項は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載しておりますので、必ずお読みください。

安全にお使いいただくために様々な絵表示で表しています。その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区別しています。  
内容をよく理解してから本文をお読みください。



**警告**

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



**注意**

誤った取り扱いをしたときに、ケガをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

## 絵表示の意味



禁止



風呂、シャワー室での  
使用・保管禁止



濡れ手で禁止



分解禁止

記号は、  
してはいけない  
こと(禁止)を  
表しています。



必ず守る

記号は、しなければ  
ならないこと(強制)  
を表しています。

# 安全上のご注意 (症状について)

## 警告



禁止

- 次のような方は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。
  - ① 医師からマッサージを禁じられている方  
例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など
  - ② 次のような医療機器用電子機器をお使いの方
    - ・ペースメーカーなどの体内植込み型電子機器
    - ・人工心肺などの生命維持用医用電子機器
    - ・心電計などの装着型医用電子機器
  - ③ 重度の血行障害のある方
  - ④ 骨折・骨粗しょう症など骨に異常のある方
  - ⑤ 知覚障害や意思表示のできない方
  - ⑥ 飲酒中、生理中、妊娠中、出産直後、授乳中の方
  - ⑦ 安静を必要としている方や体調がすぐれない方
  - ⑧ 毛細血管拡張を起こしている方
  - ⑨ 自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方、17歳以下のお子様※上記以外で身体に異常を感じる時は、いかなる場合も使用しないでください。  
事故、体調不良、症状を悪化させる原因になります。







必ず守る


- 次のような方は必ず医師とご相談の上ご使用ください。
  - ① 国で定められている指定難病を患っている方
  - ② 悪性腫瘍のある方、心臓に障害のある方
  - ③ 急性疾患の方
  - ④ 変形性関節炎、リウマチ、痛風の方
  - ⑤ 有熱性疾患、感染症疾患、伝染病疾患の方
  - ⑥ ねんざ、肉離れなど、急性とう(疼)痛性疾患の方
  - ⑦ 体温38℃以上(有熱期)の方  
(例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動などの強い時期、衰弱しているとき])
  - ⑧ けんしょう(腱鞘)炎の方
  - ⑨ 呼吸器に障害がある方
  - ⑩ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害のある方
  - ⑪ 脳神経に異常を感じている方(てんかんなど)
  - ⑫ 美容整形を行っている方
  - ⑬ 介護を受けている方、または付き添いなしで日常生活ができない方、  
その他医師の治療を受けている方や上記以外にとくに身体の異常を感じている方※使用前や使用中、肌や身体に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、  
医師にご相談ください。

# 安全上のご注意 (ご使用・保管について)

## 警告

 <p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●ご使用前に、必ず布地が破れていないか確認してください。破れがある場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご連絡ください。事故やけがの原因になります。</li><li>●太もも・ひざ・ふくらはぎ・足のケア以外の目的で使わないでください。事故やけがの原因になります。</li><li>●本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでください。事故のおそれがあります。</li><li>●本製品は一般家庭用です。業務用として使用しないでください。</li><li>●運転中、睡眠中に使用しないでください。</li><li>●1回あたり10分以内でご使用ください。連続使用する場合は、1時間以上の間隔をあげ、同一部位1日2回までのご使用にとどめてください。上記はあくまでも目安です。</li><li>●長時間の使用は筋肉や神経に必要な以上の刺激になるので、逆効果やけがの原因になります。</li><li>●取扱説明書に記載の使用方法以外で使用しないでください。</li><li>●万が一、異常な音、におい、煙が出たとき、内部に異物が混入したときは電源をオフにし、お買い上げの販売店まで連絡してください。</li></ul>
 <p>分解禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●本製品の分解、改造は絶対にしないでください。機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店に連絡してください。</li></ul>
 <p>風呂、シャワー室での使用・保管禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●お風呂場など、高温多湿の場所やほこりの多い場所で使用や保管をしないでください。けがや故障の原因になります。</li></ul>
 <p>濡れ手で禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●本製品(付属品含む)を濡れた手で操作しないでください。</li><li>●本製品(付属品含む)を水につけたり、水を使用してお手入れをしないでください。感電・ショートによる発火・火災のおそれがあります。</li><li>●本製品は洗濯できません。水につけたり、洗濯機に入れしないでください。</li></ul>

## 注意

 <p>必ず守る</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>●不快感や痛みを感じるほどむやみに強くしたり、無理に温度を上げたり、長時間使用しても効果が上がるわけではありません。筋肉疲労や、皮膚のヒリヒリ感ややけどの原因となることがあります。慣れるまでは、弱い設定でお試ください。</li><li>●可燃物や重いものを載せたり、毛布や座布団で覆ったり、包んだりしないでください。</li><li>●本製品を使用しながらの運動はしないでください。けがの原因になります。</li><li>●本製品をお子様・ペットの手の届くところに置かないでください。けがややけどのおそれがあります。</li><li>●火に入れないでください。※詳しくはP.15を参照。</li><li>●使用中にめまい、足の痙攣、息切れなどの身体の異常を感じた際は、すぐに使用を中止し、医師に相談してください。</li><li>●同時に2人以上で使用しないでください。事故やけがのおそれがあります。</li><li>●エアバッグに故意に力を加えて無理やり止めないでください。事故やけがのおそれがあります。</li><li>●本製品は清潔にご使用ください。お手入れ方法についてはP.14をご覧ください。</li><li>●ケア部周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。事故やけがのおそれがあります。</li></ul>
---	--

# 安全上のご注意 (ご使用・保管について)

## 注意



必ず守る

- ご使用前に、必ず操作ボタンなどが正常に動作するか確認してください。
- 使用中に体勢を変える際は十分にご注意ください。
- 医療行為には使用できません。
- 初めてご使用の際はレベル1で使用し、使用中身体に異常がないか十分注意してください。初めからエアの刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。

## 充電・充電用ケーブル・充電について

## 警告



必ず守る

- 付属の充電用ケーブル以外に接続しないでください。火災や発熱、破裂、故障の原因となります。
- 充電口の中に、ピンのような鋭いものや異物を挿し込まないでください。感電やけがの原因となります。
- 付属の充電用ケーブルを他の機器には絶対に使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- お手入れの際は必ず充電用ケーブルを本体から抜いてください。また、ぬれた手で抜き挿ししないでください。



禁止

- 充電用ケーブルが傷んだり、コンセントの挿し込みがゆるいときは使用しないでください。感電、ショート、火災の原因となります。
- 充電用ケーブルを加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじ曲げたり、束ねて使用しないでください。また、重いものを乗せたり、はさみ込んだりしないでください。火災や感電の原因となります。
- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しております。次のようなことは絶対にしないでください。発火・火災のおそれがあります。
  - ①加熱や火中投下
  - ②高温多湿環境でのご使用、充電、放置
  - ③火気のある環境でのご使用、充電、放置
  - ④ホコリやチリの多い環境での放置
  - ⑤直射日光が当たる場所や炎天下の車中など高温になる場所でのご使用、充電、放置
- もれた液に触らないでください。本製品内部や電池からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後ただちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。

## リチウムイオン電池について

### 廃棄する場合は

本体には、リチウムイオン電池が内蔵されています。

廃棄の際は、お住まいの地方自治体の条例に従って処分してください。

条例の詳しい内容は、各地方自治体にお問い合わせください。


充電用ケーブルも、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。




Li-ion

# セット内容と各部の名称

## コントローラー

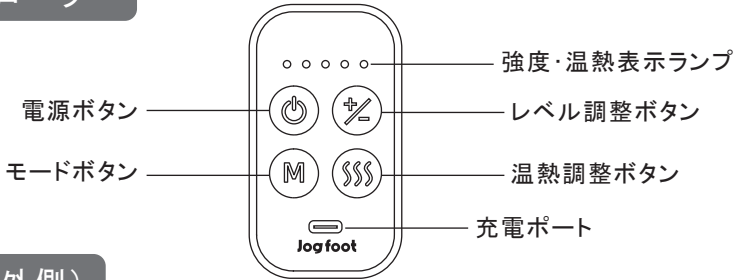


## 本体（外側）

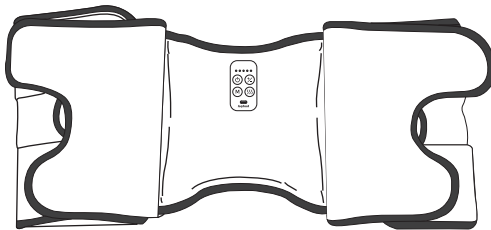


## 本体（内側・右足）

※コントローラーは  
ベルトから外せません

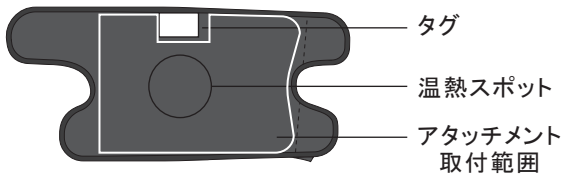

充電用ケーブル

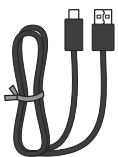


ツボ押しアタッチメント



大2個・小2個

取扱説明書（保証書付）

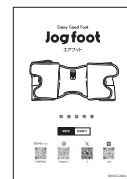


# お使いになる前に

はじめてご使用になる場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、次の手順で電源アダプターを取り付け、充電を行ってからご使用ください。また、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

## 1 コントローラーの充電ポートに、付属の充電用ケーブルを挿し込む。

※必ず付属の充電用ケーブルをご使用ください。  
※必ずケーブルの端子部分を持って抜き挿ししてください。

## 2 電源アダプターを家庭用コンセントに挿し込む。

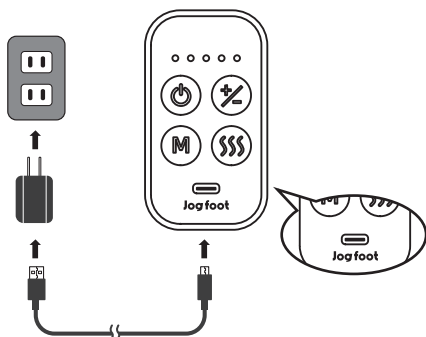

- ・電源アダプターは付属しておりません。市販の電源アダプターをご使用ください。定格出力の電圧は5V、電流は1.0A以上のものをご使用ください。
- ※充電の際は必ず付属の充電用ケーブルを使用してください。
- ・パソコンのUSBポート等からの充電はお止めください。

## 3 コントローラーのLEDランプが緑色に点滅し、充電が開始される。



- ・充電中はご使用できません。
- ・満充電後は充電用ケーブルを本体から抜いてください。
- ・満充電されるまでの時間は約120分です。
- ・充電中、本体・電源アダプターが多少温かくなりますが異常ではありません。




充電中：5つのLEDランプが順番に点灯します。  
満充電：5つのLEDランプがすべて点灯します。

# ご着用方法(ひざ)


## 1 ソファーなどに座りひざをのぼしながら、ひざうらにあてる

- ・コントローラーが前側にくるようにベルトを持ってください。ベルトの上下は内側のタグをご確認ください。
- ※ツボ押しアタッチメントはベルト内側(P.7参照)の面ファスナー以外の好きな箇所に接着できますが、刺激を強く感じる可能性もありますので、必ずレベル1からお試してください。
- ※ひざを曲げた状態で装着すると、ベルトが膝に密着せず強度が弱く感じる場合があります。必ずひざを伸ばした状態で、ベルトに隙間ができないようしっかり装着してください。

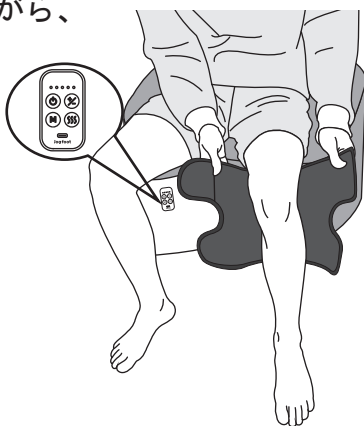


## 2 ベルトを着用する位置と高さを合わせる

- ・内側のタグの位置がひざうらの中心に位置するように着用してください。

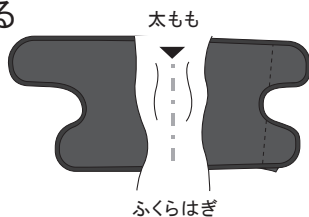

## 3 ベルトをとめる

- ・ベルトがゆるくないか(ひざとの隙間がないか)を確認し、面ファスナーをしっかりとめます。
- ・必ず両足に着用してください。

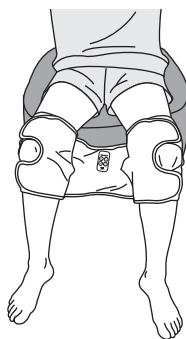


- ※温熱を使用する際は必ず衣服を着用した状態で使用してください。素肌には使用しないでください。
- ※温熱を使用する際は、使用部位に体重がかかるような体勢で使用するはおやめください。低温やけどのおそれがあります。
- ※本製品の面ファスナー(硬い面)が、衣服、ベッド、ソファー等に触れないようにご注意ください。ニット、レース、ストッキング、タイツなど、デリケートな素材の衣服の上から使用する場合は、特に引っかけによる伝線やほつれにご注意ください。

# ご着用方法(ふくらはぎ)


## 1 ソファーなどに座りふくらはぎにあてる

- ・コントローラーが前側にくるようにベルトを持ってください。  
ベルトの上下は内側のタグをご確認ください。
- ※ツボ押しアタッチメントはベルト内側(P.7参照)の  
面ファスナー以外の  
好きな箇所に接着できますが  
刺激を強く感じる可能性がありますので、  
必ずレベル1からお試ください。

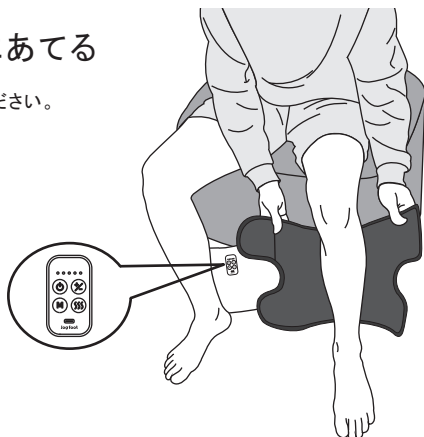


## 2 ベルトを着用する位置と高さを合わせる

- ・内側のタグの位置がふくらはぎうらの中心に位置するよう  
着用してください。

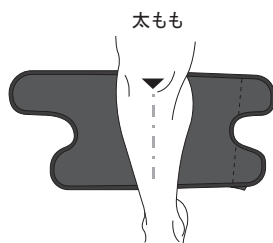

## 3 ベルトをとめる

- ・ベルトがゆるくないか(ふくらはぎとの隙間がないか)を確認し、  
面ファスナーをしっかりとめます。
- ・必ず両足に着用してください。

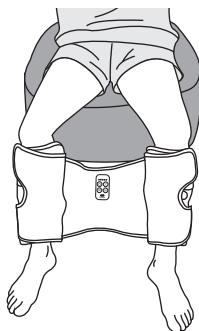


- ※温熱を使用する際は必ず衣服を着用した状態で使用してください。  
素肌には使用しないでください。
- ※温熱を使用する際は、使用部位に体重がかかるような体勢で  
使用することはおやめください。低温やけどのおそれがあります。
- ※本製品の面ファスナー(硬い面)が、衣服、ベッド、ソファ等に  
触れないようにご注意ください。ニット、レース、ストッキング、タイツなど、  
デリケートな素材の衣服の上から使用する場合は、特に引っかけによる伝線や  
ほつれにご注意ください。

# ご着用方法(足)


## 1 ソファーなどに座り足にあてる

- ・コントローラーが前側にくるようにベルトを持ってください。  
ベルトの上下は内側のタグをご確認ください。
- ※ツボ押しアタッチメントはベルト内側(P.7参照)の  
面ファスナー以外の  
好きな箇所に接着できますが  
刺激を強く感じる可能性がありますので、  
必ずレベル1からお試ください。

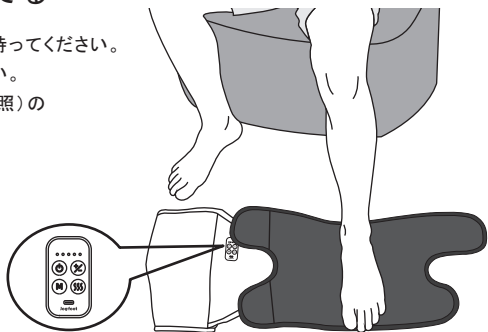


## 2 ベルトを着用する位置を合わせる

- ・内側のタグの位置が足うらの中心に位置するよう  
着用してください。

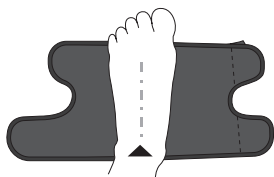

## 3 ベルトをとめる

- ・ベルトがゆるくないか(足との隙間がないか)を確認し、  
面ファスナーをしっかりとめます。
- ・必ず両足に着用してください。

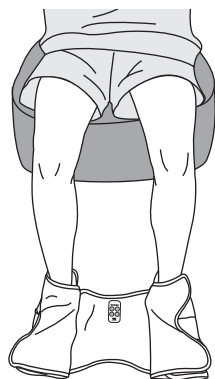

- ※温熱を使用する際は必ず衣服を着用した状態で使用してください。  
素肌を使用しないでください。
- ※温熱を使用する際は、使用部位に体重がかかるような体勢で  
使用することはおやめください。低温やけどのおそれがあります。
- ※本製品の面ファスナー(硬い面)が、衣服、ベッド、ソファー等に  
触れないようご注意ください。ニット、レース、ストッキング、タイツなど、  
デリケートな素材の衣服の上から使用する場合は、特に引っかけによる伝線や  
ほつれにご注意ください。


# ご使用方法

- 1 コントローラーの電源ボタン(⏻)を約2秒長押しすると、「ピッ」と音がなり電源が入ります。

※電源を入れると、ストレッチモードが自動で開始されます。  
※強度・温熱表示ランプが1つ緑色に点灯し、レベル1から開始されます。

- 2 モードボタン(M)を押して、使用したいモードを選びます。


※途中でモードボタンを押すと、動作強度とタイマーがリセットされ、レベル1の状態ではじめから開始されます。  
※各モード約10分で自動的に停止します。

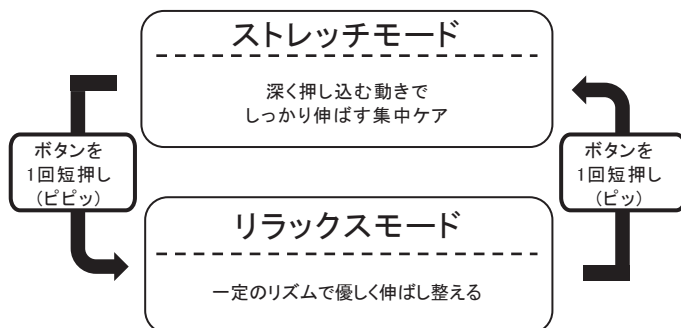

- 3 レベル調整ボタン(+/-)を短押しすると、「ピッ」と音がなり強度が変更されます。

※強度・温熱表示ランプが該当のレベルに合わせて緑色に点灯します。  
※最初はレベル1から使用し、無理のないレベルを確認してから、強度を上げていってください。

- ・出力レベルは1(弱)~5(強)の5段階です。
- レベル調整ボタンを短押しする度に「ピッ」と音がなり強度が変更されます。
- レベル5の状態ではレベル調整ボタンを短押しすると、「ピッ」と音がなりレベル1の状態に戻ります。

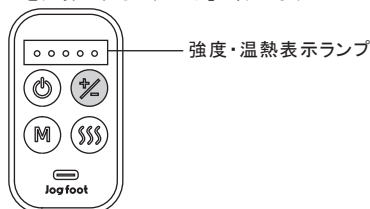


※ご使用中に「ピッピッ」と連続音が鳴り、モード表示ランプが点滅したら、充電残量が少なくなっています。使用をやめ充電を行ってから再度ご使用ください。

# ご使用方法

## 4 温熱調整ボタン( ))) を短押しして、お好みの温熱レベルを選びます。

温熱調整ボタンを短押しすることにより、温かさが切り替わります。

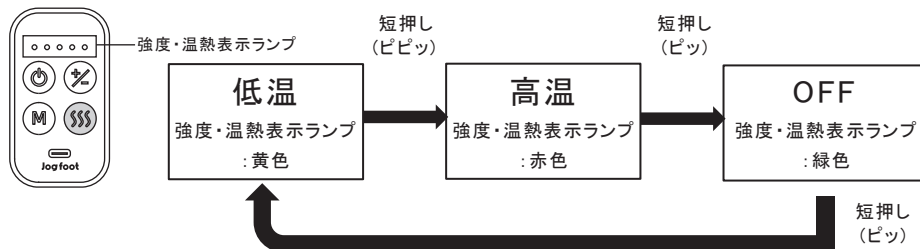

※温熱を使用する際は必ず衣服を着用した状態で使用してください。

素肌には使用しないでください。

※温かさの感じ方には個人差があります。

また、衣服の厚みや素材によっても温かさの感じ方が異なります。

※熱すぎる場合は、ただちにOFFにしてください。


※温熱を使用する際は、温熱スポットに体重がかかるような体勢で使用することはおやめください。低温やけどのおそれがあります。

## 5 プログラムは約10分間続き、「ピー」と音がなりその後自動で電源が切れます。

途中で止めたい場合は、コントローラーの電源ボタン( ) を長押しすると、電源が切れます。

# お手入れ方法と注意事項

## 本体の収納方法

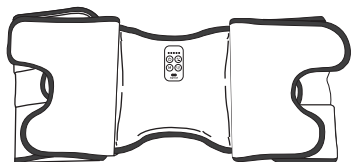

面ファスナーをとめる



折りたたむ



折りたたむ

## お手入れ方法

- 1.お手入れの前に、必ず充電用ケーブルをコントローラーから抜いてください。  
※ぬれた手で抜き挿ししないでください。感電やけがの原因になります。  
また、生地が破れていないかご確認ください。
- 2.コントローラーや本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。  
汚れが気になる場合は、ぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よくしぼってからコントローラーや本体の表面汚れを丁寧に拭き取ってください。
- 3.シンナー・ベンジン・アルコールなどの溶剤は使用しないでください。  
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。  
※絶対に水洗いしないでください。防水仕様ではありません。  
※使用后、面ファスナーをはがす際に無理に引っ張るようにはがすことはおやめください。  
過度に摩耗し、使用中に外れるおそれがあります。

## リチウムイオン電池について

- 充電電池は消耗品です。(保証対象外)  
充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、充電電池の寿命と考えられます。
- 充電電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- 3ヶ月ごとに本製品を動作させて、再度充電してください。  
長期間充電しなかった場合、充電ができなくなることがあります。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、充電用ケーブルを抜いて保管してください。

## 本製品の廃棄について

本製品を廃棄される場合は、お住まいの地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

# 保管について

本品は次のような場所に保管してください



水平で  
安定した場所




風通しの  
良い場所

気温 10~35°C  
湿度 20~80%

上記の気温と湿度の場所  
※充電時も上記条件で行っ  
てください。

本品は次のような場所に保管しないでください

本機器は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に設置すると動作不良の原因となりますので、絶対に避けてください。

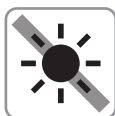

直射日光の  
当たる場所



ホコリや  
チリの  
多い場所



温度変化の  
激しい場所



湿度変化の  
激しい場所



火気のある  
場所



水に  
濡れやすい  
場所



揮発性物質  
のある場所



冷暖房機器に  
近い場所



振動のある  
場所



乳幼児や自分で意思表示できない人へ使用したり、手の届く場所に置かないでください。事故や体調不良の原因となります。

# お問い合わせする前に

<p>電源が入らない/ 途中で電源が 落ちてしまう</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・電源ボタンを長押し(約2秒間)しているか再度ご確認ください。</li><li>・電池の残量がなくなっている可能性があります。 満充電にして再度お試しください。</li><li>・充電用ケーブルがささったままになっていないかご確認ください。 充電しながらの使用はできません。</li><li>・10分間動作した後に自動で電源が切れます。 自動電源OFFではないかご確認ください。</li></ul>
<p>強度が強すぎる /弱すぎる</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・電池の残量がなくなっている可能性があります。 満充電にして再度お試しください。</li><li>・本体の巻き方によって、強度を調節できます。 強度が強い→ゆるめに巻いてください。 強度が弱い→隙間なく巻いてください。</li></ul>
<p>使用中にコントローラーが 熱くなる</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・故障ではございませんので、熱が冷めるまでしばらく電源をお切りください。触れられないくらい熱くなっている場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店へご連絡ください。</li></ul>
<p>充電しても使用可能 時間が極端に短くなった</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・充電時間が充分でない可能性があります。再度充電してお試しください。</li><li>・フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は電池寿命と考えられます。ご購入いただいた販売店にご相談ください。</li><li>・長期間(1ヶ月以上)使用していない場合、充電残量が減っている可能性があります。</li><li>・保管・使用環境により、お届け時と比べて使用可能回数に変化する可能性があります。</li></ul>
<p>温かさを感じない</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・温熱がOFFになっている可能性があります。 温熱調整ボタンを短押ししてください。</li><li>・温度が低い場合は、温熱調整ボタンを短押ししてレベルを調整してください。</li></ul> <p>※温かさの感じ方には個人差があります。 また、衣服の厚みや素材によっても温かさの感じ方が異なります。</p>
<p>熱すぎる</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>・温度が高い場合は、温熱調整ボタンを短押ししてレベルを下げてください。</li><li>・弱でも熱すぎる場合は、ただちに温熱調整ボタンを2回短押しして、温熱をOFFにしてください。</li><li>・温熱スポットに圧がかかっていると熱く感じる場合がございます。</li></ul> <p>※温熱を使用する際は、温熱スポットに体重がかかるような体勢で使用することはおやめください。低温やけどのおそれがあります。 ※温熱を使用する際は、必ず衣服を着用した状態で使用してください。 素肌を使用しないでください。</p>

# Q&A

<p>使ってはいけないときはありますか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発熱時</li> <li>・妊娠中</li> <li>・生理中</li> <li>・出産直後や授乳中 詳しくはP.4をご確認ください。</li> </ul>
<p>使用してはいけない部位はありますか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品はひざ・ふくらはぎ・足用です。取扱説明書にて指定以外の部位には使用しないでください。事故やけがの原因となります。</li> <li>・使用可能サイズ内でしたら、太ももにも使用可能です。</li> </ul>
<p>使用した場所が赤くなった</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・直ちに使用を止め、肌が正常な状態に戻るまで使用をお控えください。炎症がひかない場合は医師に相談してください。</li> </ul>
<p>睡眠中に使用できますか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・睡眠中は使用しないでください。</li> <li>また、運転中も使用しないでください。</li> </ul>
<p>浴室で使用できますか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本製品は防水仕様ではありません。使用しないでください。</li> <li>※絶対に水洗いしないでください。</li> </ul>
<p>使用時間、使用頻度の目安はありますか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・モードを設定してから約10分後に自動で電源がOFFになります。連続使用する場合は、1時間以上の間隔をあげ、同一部位1日2回までのご使用にとどめてください。上記はあくまでも目安です。</li> </ul>
<p>使用できる足・ふくらはぎ・ひざのサイズは？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用可能サイズ</li> <li>巻き付け周囲：約20～52cm</li> </ul>
<p>使用中、ベルトがずれた感じがします。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・衣類が動きベルトがずれたように感じる場合がありますが、異常ではありません。</li> </ul>
<p>ベルトの空気が抜けないです。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エアーバッグに残っている空気が多いと、空気が抜けるのに時間がかかる場合があります。空気が自然に抜けるまでしばらくお待ちください。</li> </ul>
<p>使用中、焦げ臭い</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・機械の故障が考えられます。ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>
<p>異音がある</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バリバリ音：エアーバッグに空気が入るとき、面ファスナーが引っぱられる音です。</li> <li>・ウォーン音／ウィーン音：モーターの音です。</li> <li>・シュー音／スー音：エアーの排気音です。</li> <li>構造上発生する音です。異常ではありません。</li> </ul>

# 保証とアフターサービスについて

## 保証書について

保証書は取扱説明書の最後のページになりますので必ず「販売店・購入日」等をご記入の上、内容をよくお読みいただき大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日より1年間となります。この保証は本体のみに適用し、その他の付属品には適用されません。

※なお、お客様都合による紛失、破損、故障等は保証対象外となります。

## アフターサービスを依頼される前に

アフターサービスを依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検の上、それでも異常がある場合はお買い上げの販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。

## 故障した場合の連絡について

お買い上げの販売店、もしくはお客様相談室へご連絡ください。

## 保証期間経過後の対応について

お買い上げの販売店、もしくはお客様相談室へご相談ください。  
ご希望により有償にて代替品交換対応とさせていただきます。

## 補修部品の最低保有期間について

本製品の補修用部品については、3年を目安に保管しておりますので、原則として本製品の機能を維持するために必要な補修用性能部品の保有期間は3年です。  
なお、期限経過後であっても、対応可能な場合もありますので、お買い上げの販売店もしくはお客様相談室へご相談ください。

# MEMO

---

A large dashed rectangular box occupies the central portion of the page, intended for writing the content of the memo. The box is defined by a series of short, horizontal and vertical dashes forming a complete rectangle.

# MEMO

---

A large dashed rectangular box occupies the central portion of the page, intended for writing the memo's content. The box is defined by a series of short, evenly spaced dashes forming a complete rectangle.

# MEMO

---

A large dashed rectangular box occupies the central portion of the page, intended for writing the memo's content. The box is defined by a series of short, horizontal and vertical dashes forming a square-like shape.

# 保証規約

---

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無償対応とさせていただきます。無償対応をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店へ本製品と保証書をご提示いただきお申し付けください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
  - ・本製品に付属の充電用ケーブル以外を使用した場合
  - ・取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
  - ・不当な修理や改造による故障および損傷
  - ・お買い上げ後の保管場所・輸送・落下などによる故障および損傷
  - ・一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障および損傷
  - ・製品使用後の汚れ、塗装はがれ、使用による摩耗、破れなどの故障および損傷
  - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害などによる故障および損傷
  - ・車両、船舶などで配送した場合の故障および損傷
  - ・保証書のご提示がない場合
  - ・保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合  
(通信販売にてお買い上げのお客様はお届け伝票をご提示ください)
  - ・当社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷
  - ・正規販売店以外(リサイクルショップ・ネットオークション等)で購入した場合
3. 本保証書は、日本国内のみ有効です。
4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償対応をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の対応についてご不明な点は、お買い上げの販売店もしくはお客様相談室へお問い合わせください。

保証期間経過後の対応や、補修部品の保管期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービスについて」をご覧ください。

# 保証書

本書は、本書の記載内容で保証期間内に無償対応を行う事をお約束するものです。

お買い上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店もしくはお客様相談室へ依頼してください。

商品名	ジョグフット エアフット
型番	EGF-30
保証期間	お買い上げ日から1年間(本体のみ)
お買い上げ日	年 月 日
※お客様情報	ご住所 〒 お名前 電話( ) -
※販売店	販売店名 電話( ) -

※印欄は必ずご記入ください

症状の内容をできるだけ詳しくご記入ください

株式会社ジヴァスタジオ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-17-11

TEL:0120-998-830 10:00-16:00(土日祝休)

内容说明	K40131双腿气压说明书	
版本日期	2026.01.09	陈梦雅

### 颜色说明



BLACK



WHITE

材料说明	128g铜版纸	
工艺说明	骑马订 封面封底覆哑膜	
尺寸说明	144*210mm	